



Non-Latex Surgical Gloves

UNA SEGUNDA PIEL... QUE RESPETA LA PRIMERA



Proporciona un rendimiento y una protección inigualables para todas las manos

La línea de productos GAMMEX® Non-Latex ofrece la más completa gama de opciones sin látex, llevando la prevención de alergias más allá de la eliminación del látex con una avanzada protección contra las reacciones alérgicas a productos químicos tanto para pacientes como para trabajadores sanitarios.

Proporciona una amplia protección tanto a los trabajadores sanitarios como a los pacientes

Ansell utiliza fórmulas y tecnologías propias para crear una amplia gama de opciones libres de látex que son fáciles de usar y proporcionan protección y seguridad a cualquier perfil alérgico y necesidad quirúrgica.

- Las opciones a base de poliisopreno ofrecen una **comodidad parecida a la del látex** a los trabajadores sanitarios que padecen alergia al látex y alergias de tipo IV causadas por difenilguanidina (DPG)

— Guantes de poliisopreno sin DPG incluyen:

- GAMMEX® PF IsoDerm®
 - GAMMEX® PF IsoDerm® Sensitive
 - GAMMEX® PF IsoDerm® Underglove
- Una **opción de neopreno sin aceleradores**, GAMMEX® PF DermaPrene®, ofrece una protección adicional a los trabajadores sanitarios que tienen alergias de tipo IV a los aceleradores químicos

El rendimiento que espera de GAMMEX®

Como todos los guantes GAMMEX®, la línea de productos Non-Latex combina una comodidad y una sensibilidad inmejorables con una gran resistencia. Cada guante se fabrica en los moldes exclusivos de Ansell para obtener un ajuste natural que reduce la tensión y la fatiga manual. Los guantes GAMMEX® Non-Latex proporcionan una protección confirmada por:

- Satisfacer o superar los estándares internacionales
- Proporcionar una fuerte resistencia a la permeabilidad viral, verificada mediante los resultados de amplias pruebas bacteriófagas
- Ofrecer una barrera protectora durante el manejo del producto preparado de cemento óseo*
- Proporcionar una alta resistencia ante los desinfectantes de manos a base de alcohol

La línea incluye opciones con SureFit Technology™, que elimina el enrollamiento de los puños y evita que entre fluido en el guante.


* Proporciona una barrera segura únicamente cuando se respetan las instrucciones de preparación y uso del cemento óseo.

La gama GAMMEX® Non-Latex minimiza los riesgos de alergias de tipo IV y de irritaciones cutáneas, pero algunos de los productos químicos contenidos en los guantes GAMMEX® Non-Latex pueden causar reacciones alérgicas o irritaciones en algunos usuarios.

GAMMEX® PF
IsoDerm®



GAMMEX® PF
DermaPrene®

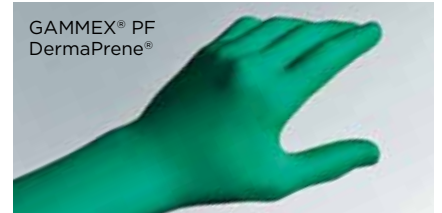



Non-Latex Surgical Gloves

ANSELL - CUMPLIENDO CON NUESTRO COMPROMISO DE MINIMIZAR LAS ALERGIAS EN EL ENTORNO SANITARIO

Una completa línea de productos sin látex que ofrece la mejor protección manual disponible actualmente

La amplia línea de productos GAMMEX® Non-Latex satisface una serie de necesidades quirúrgicas reduciendo al mismo tiempo el riesgo y proporcionando protección tanto para los pacientes como para los trabajadores sanitarios frente al látex y las alergias químicas.

Características especiales

- Un recubrimiento sin cloruro de cetilpiridinio con componentes hidrofílicos e hidrofóbicos ofrece facilidad de ajuste y cambio con las manos secas o mojadas
- La tecnología SureFit Technology™, disponible en los guantes de poliisopreno GAMMEX®, elimina el enrollamiento de los puños y proporciona a los cirujanos, enfermeras y otros profesionales sanitarios una protección superior durante los procedimientos en el quirófano
- Un suave acabado antideslizante facilita un mejor agarre de los instrumento en entornos tanto húmedos como secos
- Los moldes anatómicos exclusivos de Ansell con dedos curvados proporcionan comodidad con un ajuste natural

Estándares de calidad

- Más pruebas del producto ampliadas para una mejor garantía de calidad
- Probados estadísticamente contra orificios para GI; AQL de 1,0 tras el envasado
- Conforme a las normas EN455, AS/NZ 4179 y ASTM D3577
- Fabricado de conformidad con las normas ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 y ISO 14001:2004

Fórmula y material de los guantes

	COLOR	MATERIAL	SIN ACELERADORES	SIN DPG	SIN POLVO	SIN DERIVADOS ANIMALES
GAMMEX® PF DermaPrene®	Verde	Policloropreno; sin caucho natural	Sí	Sí	Sí	Sí
GAMMEX® PF IsoDerm®	Blanco	Poliisopreno; sin caucho natural		Sí	Sí	Sí
GAMMEX® PF IsoDerm® Sensitive	Blanco	Poliisopreno; sin caucho natural		Sí	Sí	Sí
GAMMEX® PF IsoDerm® Underglove	Verde	Poliisopreno; sin caucho natural		Sí	Sí	Sí

Especificaciones dimensionales

	LONGITUD (valores promedio típicos, mm)	
GAMMEX® PF DermaPrene®	≥305	(Talla 5.5 - Talla 9)
GAMMEX® PF IsoDerm®	≥300	(Talla 5.5 - Talla 9)
GAMMEX® PF IsoDerm® Sensitive	≥300	(Talla 5.5 - Talla 9)
GAMMEX® PF IsoDerm® Underglove	≥300	(Talla 5.5 - Talla 9)

Grosor (único)

	DEDO	PALMA	PUÑO
(valores promedio típicos, mm)			
GAMMEX® PF DermaPrene®	0,185	0,175	0,16
GAMMEX® PF IsoDerm®	0,23	0,215	0,175
GAMMEX® PF IsoDerm® Sensitive	0,19	0,17	0,14
GAMMEX® PF IsoDerm® Underglove	0,19	0,17	0,14

Información de pedidos

	CÓDIGOS DE PEDIDO TALLA 5.5 A 9	ENVASADO
GAMMEX® PF DermaPrene®	353201 a 353208	25 pares por caja dispensadora; 4 cajas por embalaje
GAMMEX® PF IsoDerm®	353611 a 353618	40 pares por caja dispensadora; 6 cajas por embalaje
GAMMEX® PF IsoDerm® Sensitive	353601 a 353608	
GAMMEX® PF IsoDerm® Underglove	353621 a 353628	

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de algún producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.



Ansell, ® y ™ son marcas registradas propiedad de Ansell Limited o de uno de sus afiliados. © 2011 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

WWW.ANSELL.EU

Medical
Solutions

